
Data Logger (Registrador de datos)



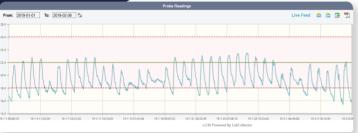

Soluciones multicanal

O Centraliza tu monitoreo en LabCollector.

Aplicación basada en la red para control las 24 horas del día de salas y equipos de temperatura, humedad, CO2 y cliclos de luz/oscuridad.

Registro de temperatura visible para cada sensor en la base de datos. Recupera datos por un período definido (contol de calidad).

🗘 Graficos históricos disponibles.

Alertas por correo electrónico y/o SMS cuando los valores salgan de los rangos definidos.

🗘 Instalación local o en la nube.

5.3 °C -0.2 Pa 0.5 Pa 3.8 Pa -180.1 °C -15.9 °C

4.1 Pa

Sistema de

O Todo tipo de sensores posibles y sensores de temperatura ultra baja.



83.0 %RH

37.5 °C

Monitoreo Ambiental

Email y SMS!





AgileBio SARL

STORAGE accessories https://storage-accessories.com

思Consigue todos tus sensores y accesorios online

Fácil sistema de monitoreo plug and play para tu laboratorio



Hardware



Registrador de datos para conectar tus sensores: temperatura, humedad, CO2, etc (ethernet WIFI).



Extensión analógica para sensores 4-20 mA (+200°C).



Caja GSM/SMS para envío de alertas.



Extensión y conectores Rj45.



Sensores de temperatura digitales (-55°C/150°C).



Kit de sensores RTD de baja temperatura (-200°C/100°C).



Muchos tipos más.



El registrador de datos (Data Logger) es una aplicación basada en la red para el control de sensores ambientales las 24 horas del día. Puede rastrear sensores como temperatura, humedad, gases, CO2, luz, presión e interruptores (para configuraciones de alarmas) y centralizarlos en LabCollector LIMS. Conecta varios tipos de hardware y sensores de registro de datos a tus equipos de laboratorio y en áreas relevantes del entorno para que las fluctuaciones en los parámetros puedan seguirse con el complemento Data Logger. El complemento Data Logger para LabCollector permite al personal establecer parámetros para cada pieza de equipo/espacio de laboratorio (temperatura esperada y rangos de tolerancia), define receptores SMS (empleando nuestra extensión de salida SMS) y administra alertas por correo electrónico. Todas las alertas son registradas con fines históricos y las lecturas pueden ser buscadas fácilmente por periodos mediante una pantalla gráfica.

¡Solicita un kit de prueba GRATIS*!

*Para permitir la prueba de este complemento en condiciones óptimas, podemos prestar un kit gratuito por 30 días (1 registrador de ethernet + 1 sensor de temperatura digital).

